

オルソケラトロジー

内容物

レンズ

右が透明、左が青

※診察に来られる時は必ずレンズを持参ください

破損時も破片を回収するので保管する


黄色いケースも保管



レンズケース


必ず専用の物を使用する

3ヶ月ごとに新しいものを当院からお渡しするので
交換して使ってください

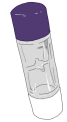

スポイト

レンズを外す時に使用

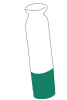

メニコンフィット

レンズをつける時に使用。市販のものでもOK
(色付きのものの方が分かりやすくて良い)



ベノキシール

表面麻酔。始めたばかりの頃に使用
1本使い切るまでには中止する



(消毒液)

アミノソラ

こすり洗い用。市販のハードコンタクト用の物でもOK。



クリアデューO2

毎日の消毒つけおき用。代替品はNG。



プロージェント

月に1回使用。代替品はNG。



夜装着するとき



①手をよく洗う

②(始めてすぐの頃のみ) ベノキシールを1滴点眼する

③レンズをケースから出して水道水ですすぐ

→アミノソラでこすり洗い

(レンズが流されないよう水の勢いに注意!)


④再度しっかり流水ですすぐ

⑤レンズにメニコンフィットを1滴おとす


⑥レンズを黒目の上にのせる

(空気が入っていないかチェック)


こすり洗いの方法

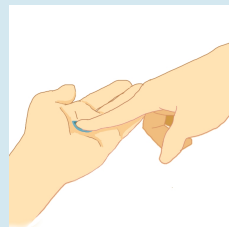

手のひらに
のせて洗う

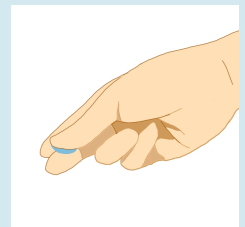

人さし指と中指に
のせて洗う

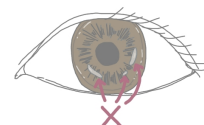





朝のお手入れ



- ①手をよく洗う
- ②レンズをスポイトで外す
※スポイトからレンズを外す時、白い部分を押す
(無理にとるとレンズが割れる可能性があります)
- ③レンズをアミノソラでこすり洗い
→水道水でよくすすぐ
- ④レンズケースのふたのホルダーにレンズをはめる
- ⑤ケースの9分目くらいまで水道水を入れる
- ⑥クリアデューO2の錠剤を1つ入れてふたを閉める
→4時間以上置いて色が変われば消毒完了
(夜までこのまま置いておいてかまいません)

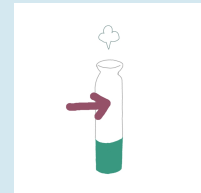

空気が出てレンズが
取れやすくなる

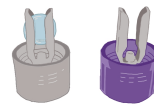

※午前中に診察に来られる日はこすり洗いのみで置いておく
→診察後にクリアデューO2で消毒



月に1回のお手入れ



- ①手をよく洗う
- ②レンズをアミノソラでこすり洗い
→水道水でよくすすぐ
- ③プロージェント専用容器のキャップホルダーにレンズをセット
- ④容器にA液とB液を入れる
→キャップを閉めて2,3回振って混ぜる
→30分つけ置き



※消毒後、レンズをつける前は必ずいつも通りこすり洗いとすすぎをしてください

※プロージェントの説明書には2週に1回とありますが、クリアデューO2での消毒を毎日行なっているため、1ヶ月に1回の使用でかまいません

当院で購入される場合の値段

(税込)

スポイト ¥440

メニコンフィット ¥660

クリアデューO2 ¥880

プロージェント 容器 ¥880
液 ¥1320



いわみ眼科